



# Rent vand med DUC23

Sikkert vand til klinikkens units

For You and Planet Blue

 **BWT**  
BEST WATER TECHNOLOGY



# BWT DUC23 + Dental Unit CleanR™

**FRI** for  
BAKTERIEVÆKST,  
LEGIONELLA  
og BIOFILM




- Til klinikker med max 10 units
- BWT's innovative doseringssystem
- Rent vand uden bakterier, legionella og biofilm
- Kontinuerlig dosering af desinfektionsmiddel til det behandlede rene vand til units
- Sikkert og enkelt
- Nem udskiftning af dunken med BWT Unit CleanR™

BWT's DUC23 er et innovativt doseringssystem, der bruges til at beskytte dentale units mod bakterievækst, legionella og ophobning af biofilm.

BWT DUC23 systemet leveres fuldstændig samlet på et panel, der er forberedt til vægmontering. Systemet inkluderer niveauekontrol med visning af pulser til dosering og væskniveau i 5 l-dunken med BWT Dental Unit CleanR™.

## DUC23 displayet farver viser tydeligt niveauet i beholderen

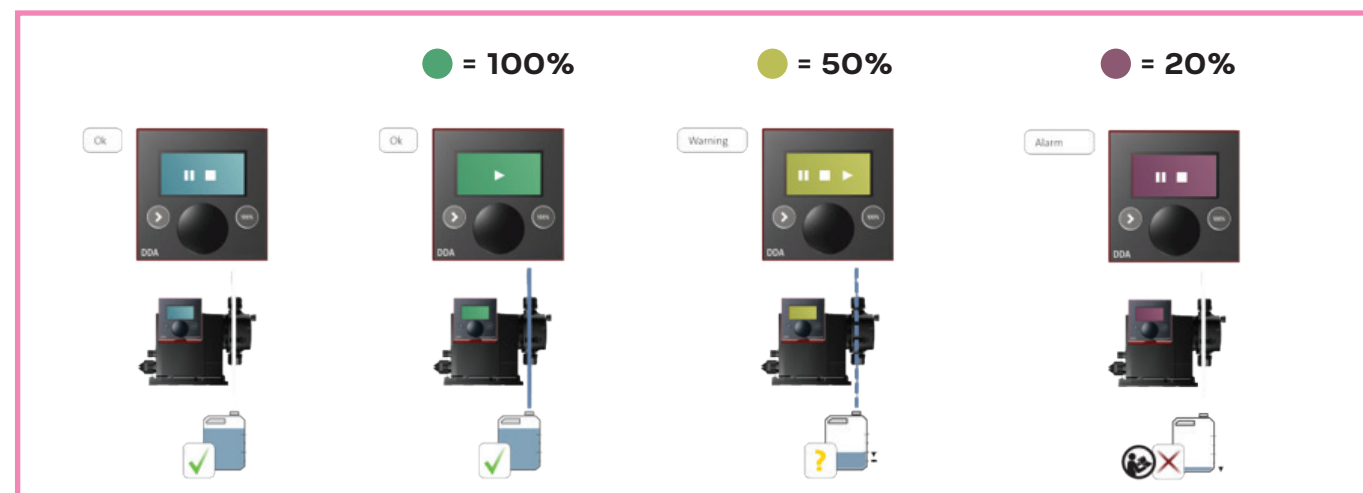

## Kontinuerlig dosering

BWT DUC23 doseringssystemet skal kombineres med et forbehandlingsanlæg fra BWT, såsom:

### BWT ROC Clinic ONE

Desinfektionsmidlet fra DUC23 doseres kontinuerligt i det behandlede vand fra forbehandlingsanlægget, hvilket sikrer beskyttelse mod legionella, ophobning af biofilm og bakterier helt ud til instrumenterne i unitten.



**Vil du vide mere om BWT ROC Clinic ONE?**

Scan QR-koden  
... og få kontakt til vores Dental ekspert

## Test og måling af vandkvalitet

Klinikken kan løbende, med BWT teststrimler, måle vandkvaliteten og kontrollere om desinfektionsmidlet når helt ud til instrumenterne i klinikkens units.



## Teknisk data DUC23

Nøgledata	
Max. flow	160L/h
Strøm	
Strømforsyning	110-230V/50-60Hz
IP klasse	IP 54
Indløbs- og udløbsledninger	
Til- og afgangsvand	3/4" nippel
Mål og vægt	
Dimensioner (B x D x H)	400 x 200 x 430 mm
Vægt	8 kg
Varenummer	
BWT DUC23	421700000

## Forbrugsvarer

BWT Unit CleanR™ – 5 liter dunk	701957041
BWT Teststrips – 50 stk.	701978030



For You and Planet Blue.

BWT Danmark  
Geminivej 24  
2670 Greve

+45 43 600 500  
✉ [bwt@bwt.dk](mailto:bwt@bwt.dk)